

PRODUKTDATENBLATT

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography)



Produkt	LEPU MEDICAL SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Kolloidale Gold-Immunochromatographie)
Artikelnr.	cap-med-120
Verpackungseinheit (VPE)	25 Stk. Box (Mindestabnahme 100 Stk. - 4Boxen)
Testverfahren	Antigen Schnelltest (Nasen-Abstrichverfahren)
Zulassung / Genehmigung	2. September 2020, CE-InCG27 REV.06
EC/REP	Lepu Medical (Europe) Cooperatif U.A.
Limit of Detection (LOD)	2 x 10 ² TCID ₅₀ /ml (200 TCID ₅₀ /ml),
Sensitivität / Spezifität	94,37 % (97,32 % für Proben mit Ct-Werten ≤ 25) / 99,62%
Listung	Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte >> anklicken <<
Anwendungsbereich	Krankenhäuser, Arztpraxen, Alten- und Pflegeheime
Vertrieb im Auftrag der	BIOCHEM Bernburg GmbH www.biochem-bernburg.de

CAPULUS übernimmt keine Gewährleistung/ Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der vom Hersteller bereitgestellten Informationen und Daten. Das Produkt kann vom o.g. Bild abweichen.

Kontakt / Bestellungen:

Tel: +49 40 307 772 15

[Produktblatt Hersteller >> hier anklicken <<](#)

E-Mail: info@capulus-medical.de

[Konformitätserklärung >> hier anklicken <<](#)

Anfragen: Bestellformular Geschäftskunden


[Klinikvalidierungsbericht über IVD-Reagenzien >> hier anklicken <<](#)

Internet: www.capulus-medical.de

[Bundesanzeiger Ankündigung >> hier anklicken<<](#)

Der Warenversand/-Abrechnung erfolgt über die BIOCHEM Bernburg GmbH, Neuer Weg 1 – 06406 Bernburg. Die BIOCHEM Bernburg GmbH ist nach ISO 13485 zertifiziert.

TEST IM ÜBERBLICK



The image shows the packaging for the SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit. The top of the box features the LEPU MEDICAL logo. The main title is "SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography)". Below the title, there is a diagram of the test strip with two result windows labeled (+) Positive and (-) Negative. At the bottom of the box, there is a QR code and the text "SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography)".

LEPU MEDICAL

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography)


- Non-invasive
- Simple to use
- Convenient, no devices required
- Rapid, get result in 15 minutes
- Stable, with high accuracy
- Inexpensive, cost-efficiency

Hospital **Test site** **Airport** **Station** **Hotel** **Corporation** **Mass Screening**



EINFACHE BEDIENUNG


Anleitung

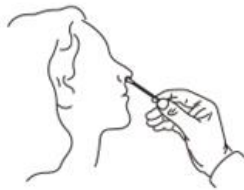


Schritt 1: Entnehmen Sie die Probe anhand des beiliegenden Stäbchens.



Schritt 2: Entfernen Sie die Schutzabdeckung des Klebestreifens.

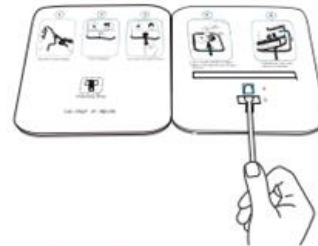

Schritt 3: Schieben Sie die Probe durch die Öffnung von Vertiefung B in Vertiefung A.

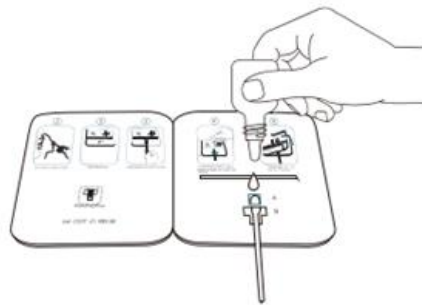

Schritt 4: Geben Sie 6 Tropfen Verdünnungsmittel in Vertiefung A. Drehen Sie den Abstrich 2x in jede Richtung.




Schritt 5: Kleben Sie die linke und rechte Seite zusammen. Das Testergebnis wird in 15 Minuten angezeigt.

Ergebnisinterpretation

Positiv

(+)

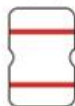


Negativ

(-)



Falsch

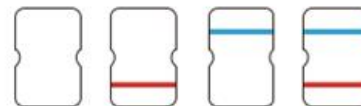

BEIJING LEPU MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Building 7-1 No.37 Chaoqian Road, Changping District, Beijing, 102200, P.R.China

Tel: +86-10-8012 3964

Email: lepuservice@lepumedical.com

Web: en.lepumedical.com

HANDHABUNG IM VERGLEICH

Booklet-Architektur minimiert die Exposition des Personals

Antigen Test Mitbewerber



Antigen Test Mitbewerber

